



7 STĚNY PRO ROZVOD MÉDIÍ (stěny médiové)

Médiové stěny slouží k umístění vyústění (vývodů) všech dostupných či běžně používaných médií na laboratorním stole. A to jak kapalných či plyných, tak i elektrické energie, slaboproudu, PC sítí atd., nad pracovní desku do prostoru snadného přístupu a obsluhy, či pro napojení do přístrojů. Stěny však také slouží k řádnému a bezpečnému uložení a vedení rozvodů těchto médií, a to s ohledem na pravidelnou údržbu, servis a nutné revize. Vzhledem k rozdílným požadavkům při práci, nabízíme širokou škálu jednotlivých typů a variant médiových stěn s variabilními možnostmi využití a s různým připojením a vývody médií tak, aby pokryly veškeré požadavky různých typů laboratoří, jak s lehkým zatížením jako jsou např. laboratoře fyzikální či elektrotechnické, přes laboratoře s určitou mírou čistoty prostředí, až po laboratoře analytické s těžkým chemickým zatížením prostředí a použitých materiálů.

S ohledem na tuto rozmanitost prostředí, do kterého jsou médiové stěny **MERCI®** určeny, jsou médiové stěny **MERCI®** vyrobeny z kombinací nejkvalitnějších materiálů pro vysokou užitnou hodnotu, kvalitu a životnost. Stejně jako u digestoří **MERCI®** je pro výrobu použit jako základní materiál, slibující vysokou stabilitu a nehořlavost, ocelový plech s povrchovou úpravou vypalovací epoxidovou barvou tvořící velmi pevný skelet s odolným povrchem, a v kombinaci s ostatními materiály vytváří požadované parametry pro daný účel použití médiové stěny.

Množství typů, variant a provedení jednotlivých médiových stěn **MERCI®** umožňuje téměř nepřehlednou volbu možností vybavení Vašeho pracoviště. Nabízíme médiové stěny s různými variantami vývodů médií a to jako sloupové, mostové, panelové, s rozdílným počtem a hloubkou polic, variabilní výškou stěny, různým umístěním odpadní vaničky a vodovodních ventilů atd. Ke všem stěnám je navíc připraveno speciální příslušenství, jako mřížky pro aparatury či osvětlení pracovní plochy, více detailností najdete na stránkách stěn jednotlivých modelových řad.

Pro ucelenost návrhu a designovou kompatibilitu jsou médiové stěny **MERCI®** samozřejmě vzhledově jednotné s digestoři **MERCI®**, a člení se tedy na stěny modelové řady N a G a designově univerzální jsou stěny modelové řady Z (závěsné ze stropu), které lze kombinovat se všemi typy digestoří i jinými stěnami.

Podrobnější informace o stěnách řady G naleznete na str. 1 » 64 a o stěnách řady N naleznete na str. 1 » 68.



Stěny pro rozvod médií - stojící na podlaze

- nabízí samonosnou konstrukci a možnost vysokého zatížení ve všech svých variantách, ve kterých je vyráběna, dále možnost instalace odpadní vaničky 120 x 295 mm přímo do médiové stěny, u určitých typů stěny je také možnost volby na levé či pravé straně. Tyto sloupky stojící na podlaze jsou v úrovni pracovní desky spojeny tzv. mostem, který slouží nejen k rozvodu daných médií, ale hlavně k umístění odpadní vaničky, výše nad pracovní deskou jsou sloupky spojeny v různých variantách policemi různých druhů provedení.



Stěny pro rozvod médií - usazené na pracovní desce stolu

- nabízí od médiové stěny stojící na podlaze, souvislou pracovní desku stolu procházející pod médiovou stěnou. Možnost maximálního zatížení ve všech svých variantách, ve kterých je vyráběna, je dána maximální únosností pracovní desky a pracovního stolu. Instalace odpadní vaničky rozměru jak 120 x 120 mm, tak 120 x 295 mm nelze do médiové stěny, ale provádí se přímo do pracovní desky stolu, kde se nabízí možnost umístění vlevo či vpravo. Tyto sloupky stojící na pracovní desce jsou u tohoto typu médiové stěny spojeny až výše nad pracovní deskou v různých variantách policemi různých druhů provedení.



Stěny pro rozvod médií - závěsné (zavěšené nad pracovní deskou stolu)

- nabízí samonosnou zavěšenou konstrukci, která lze zavěsit kamkoliv v místnosti. Je vhodná především k použití u oboustranných laboratorních stolů, kde se z ekonomických důvodů nevyplatí vést médiové připojení podlahou. Stěnu lze zavěsit do libovolné výšky nad pracovní plochou stolu.

Příslušenství - volitelné

Pro uspokojení Vašich specifických požadavků nabízíme originální příslušenství.

Příslušenství stěn je konstrukčně navrženo s ohledem na snadnou i následnou doinstalaci do stěn. Samozřejmě volbou či doinstalací originálního příslušenství **MERCI®** není ohrožena Vaše bezpečnost ani záruka.

Osvětlení



Pod police stěny lze namontovat LED osvětlení, které osvětlí pracovní plochu. Profilovaná hliníková lišta pro rozptyl tepla je ukončena plastovými krytkami a samotný pásek je krytý plastovým matným/mléčným krytem. LED diody svítí bílou studenou barvou s vysokou svítivostí.

Součástí lišty je integrovaný bezdotykový vypínač pro ovládání osvětlení.

Mřížky



Stěny (kromě **MERCI® Z**) lze osadit nerezovými demontovatelnými mřížkami, které slouží pro uchycení armatur, přístrojů nebo jiného zařízení. Počet vertikálních i horizontálních tyčí je volitelný, ale standardně se skládá z 3 vertikálních (dle šířky stěny) a 2 horizontálních tyčí. Montáž mřížky lze provést dodatečně, protože kotvicí místa jsou již součástí základního vybavení stěny, popř. lze mřížku demontovat, pokud není využívána.

Elektro



Všechny médiové stěny **MERCI®** mají pro volbu či doplnění elektro zásuvek použit variabilní kazetový systém umožňující libovolnou volbu počtu a typu elektrozásuvek. Veškeré elektrozásuvky stěn jsou vybaveny uzavíratelnou krytkou se zvýšenou ochranou proti vodě a prachu. Součástí příslušenství jsou jak zásuvky na 230 V i 400 V, tak i zásuvky pro bezpečné napětí 12 V - 48 V, či slaboproudé zásuvky pro rozvedení místních sítí.



Stěna pro rozvod médií G - sloupová varianta (umístění médií na bočních sloupech)



jednostranná



oboustranná

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

šířka stěny	900, 1200, 1500, 1800 mm
hloubka stěny	150 mm
hloubka stěny s policí	150, 300, 350 mm
výška stěny	1620 mm
pro výšku pracovní desky	900 mm
materiál polic	laminát vysokotlaký (HPL)
provedení polic	- 1x police hl. 126 mm + 1x police hl. 150 mm (pro výšku 1620 mm, pro jednostranné provedení) - 1x police hl. 126 mm + 1x police hl. 300 mm (pro výšku 1620 mm, pro jednostranné provedení) - 1x police hl. 126 mm + 1x police hl. 150 mm (pro výšku 1620 mm, pro oboustranné provedení) - 1x police hl. 126 mm + 1x police hl. 350 mm (pro výšku 1620 mm, pro oboustranné provedení)
možnost umístění vaničky	u bočních sloupků (L, P, L+P)
umístění médií	na bočních sloupech
provedení	jednostranná, oboustranná

i Stěny všech uvedených parametrů Vám nabídneme dle potřeby.

Stěna pro rozvod médií typ G - sloupová varianta (umístění médií na bočních sloupech)



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

šířka stěny	900, 1200, 1500, 1800 mm
hloubka stěny	150 mm
hloubka stěny s policí	150, 200, 350 mm
výška stěny	1320 mm
pro výšku pracovní desky	900 mm
materiál polic	laminát vysokotlaký (HPL)
provedení polic	- 1x police hl. 150 mm (pro výšku 1320 mm, pro jednostranné provedení) - 1x police hl. 200 mm (pro výšku 1320 mm, pro jednostranné provedení) - 1x police hl. 150 mm (pro výšku 1320 mm, pro oboustranné provedení) - 1x police hl. 350 mm (pro výšku 1320 mm, pro oboustranné provedení)
možnost umístění vaničky	u bočních sloupků (L, P, L+P)
umístění médií	na bočních sloupech
provedení	jednostranná, oboustranná


i Stěny všech uvedených parametrů Vám nabídneme dle potřeby.



Stěny pro rozvod médií G - sloupová (kompatibilní s digestořemi modelové řady MERCI® G)


Stěny kovové G - sloupová (jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky)

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA
2SGS ZJB1 090 01M	se 2 policemi, hl. 126+150 mm (výplň police HPL)	900 x 150 x 1620	20 890,00
2SGS ZJB1 120 01M	se 2 policemi, hl. 126+150 mm (výplň police HPL)	1200 x 150 x 1620	21 920,00
2SGS ZJB1 150 01M	se 2 policemi, hl. 126+150 mm (výplň police HPL)	1500 x 150 x 1620	22 870,00
2SGS ZJB1 180 01M	se 2 policemi, hl. 126+150 mm (výplň police HPL)	1800 x 150 x 1620	23 940,00
2SGS ZJB1 090 02M	se 2 policemi, hl. 126+300 mm (výplň police HPL)	900 x 300 x 1620	21 950,00
2SGS ZJB1 120 02M	se 2 policemi, hl. 126+300 mm (výplň police HPL)	1200 x 300 x 1620	22 900,00
2SGS ZJB1 150 02M	se 2 policemi, hl. 126+300 mm (výplň police HPL)	1500 x 300 x 1620	23 940,00
2SGS ZJB1 180 02M	se 2 policemi, hl. 126+300 mm (výplň police HPL)	1800 x 300 x 1620	25 270,00

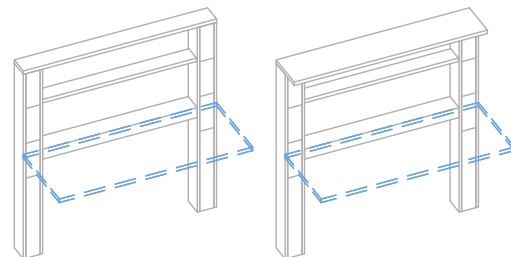


Stěny kovové G - sloupová (jednostranná, stojící na podlaze, s odpadní vaničkou vpravo)

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA
2SGS ZJP1 090 01M	se 2 policemi, hl. 126+150 mm (výplň police HPL)	900 x 150 x 1620	21 290,00
2SGS ZJP1 120 01M	se 2 policemi, hl. 126+150 mm (výplň police HPL)	1200 x 150 x 1620	22 240,00
2SGS ZJP1 150 01M	se 2 policemi, hl. 126+150 mm (výplň police HPL)	1500 x 150 x 1620	23 250,00
2SGS ZJP1 180 01M	se 2 policemi, hl. 126+150 mm (výplň police HPL)	1800 x 150 x 1620	24 580,00
2SGS ZJP1 090 02M	se 2 policemi, hl. 126+300 mm (výplň police HPL)	900 x 300 x 1620	22 340,00
2SGS ZJP1 120 02M	se 2 policemi, hl. 126+300 mm (výplň police HPL)	1200 x 300 x 1620	23 230,00
2SGS ZJP1 150 02M	se 2 policemi, hl. 126+300 mm (výplň police HPL)	1500 x 300 x 1620	24 320,00
2SGS ZJP1 180 02M	se 2 policemi, hl. 126+300 mm (výplň police HPL)	1800 x 300 x 1620	25 920,00

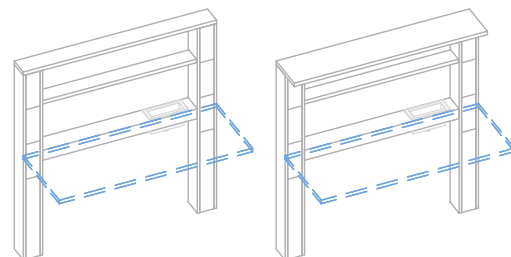


Stěny kovové G - sloupová (oboustranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky)

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA
2SGS ZOB1 090 03M	se 2 policemi, hl. 126+350 mm (výplň police HPL)	900 x 350 x 1620	24 800,00
2SGS ZOB1 120 03M	se 2 policemi, hl. 126+350 mm (výplň police HPL)	1200 x 350 x 1620	26 090,00
2SGS ZOB1 150 03M	se 2 policemi, hl. 126+350 mm (výplň police HPL)	1500 x 350 x 1620	27 410,00
2SGS ZOB1 180 03M	se 2 policemi, hl. 126+350 mm (výplň police HPL)	1800 x 350 x 1620	28 840,00

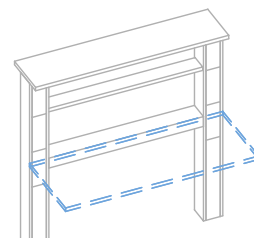


Stěny kovové G - sloupová (oboustranná, stojící na podlaze, se dvěmi odpadními vaničkami)

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA
2SGS Z001 120 03M	se 2 policemi, hl. 126+350 mm (výplň police HPL)	1200 x 350 x 1620	26 960,00
2SGS Z001 150 03M	se 2 policemi, hl. 126+350 mm (výplň police HPL)	1500 x 350 x 1620	28 250,00
2SGS Z001 180 03M	se 2 policemi, hl. 126+350 mm (výplň police HPL)	1800 x 350 x 1620	29 880,00

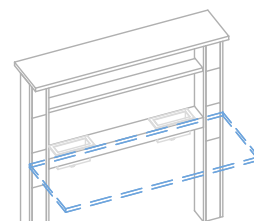

Stěny kovové G - sloupová (jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky) - nízká

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA
2SGS ZJB1 090 03M	s 1 policí, hl. 150 mm (výplň police HPL)	900 x 150 x 1320	18 240,00
2SGS ZJB1 120 03M	s 1 policí, hl. 150 mm (výplň police HPL)	1200 x 150 x 1320	19 180,00
2SGS ZJB1 150 03M	s 1 policí, hl. 150 mm (výplň police HPL)	1500 x 150 x 1320	20 050,00
2SGS ZJB1 180 03M	s 1 policí, hl. 150 mm (výplň police HPL)	1800 x 150 x 1320	21 030,00

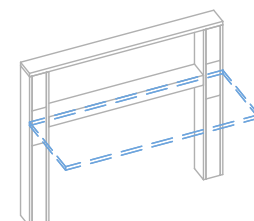

Stěny kovové G - sloupová (oboustranná, stojící na podlaze, se dvěmi odpadními vaničkami) - nízká

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA
2SGS Z001 120 06M	s 1 policí, hl. 350 mm (výplň police HPL)	1200 x 350 x 1320	20 050,00
2SGS Z001 150 06M	s 1 policí, hl. 350 mm (výplň police HPL)	1500 x 350 x 1320	21 005,00
2SGS Z001 180 06M	s 1 policí, hl. 350 mm (výplň police HPL)	1800 x 350 x 1320	22 070,00

