



## STOLY SPECIÁLNÍ

### Stůl váhový STV

Váhové stoly a pracoviště jsou prvky laboratorního vybavení speciálně zkonstruované s ohledem na zajištění maximálně stabilní polohy pro citlivé analytické či přesné váhy. Jednotlivé pracovní části stolu jsou dilatovány od umístění vah. K dokonalé stabilizaci vah přispívá speciální konstrukce, přesný a utlumený „váhový kámen“ a celková vysoká hmotnost celého stolu či pracoviště.

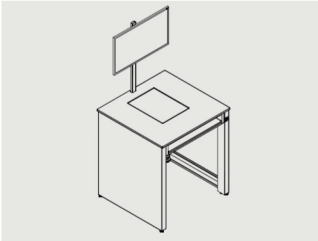
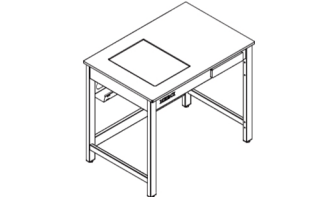

Nosná konstrukce váhových stolů i vážičích pracovišť je tvořena ocelovým svařencem pro dosažení maximální tuhosti stolu a pro snadnou údržbu povrchově upravena fosfátováním a elektrostaticky naneseným vypalovacím lakem. Konstrukce vážičích pracovišť je složena ze dvou oddělených rámu pro utlumení vibrací.

Pro maximální čistotu, odolnost a snadnou údržbu je pracovní deska stolů i vážičích pracovišť z kompaktní desky vysokotlakého laminátu (HPL) tl. 16 mm s vysokou mechanickou, vlhkostní a chemickou odolností. V desce je vždy osazen rozměrově kalibrováný „váhový kámen“ z plně přírodní žuly o rozměrech 300x400/80 mm, který je umístěn na tuhých nosných pomocích speciálních pryžových silentbloků o rozměrech a tvrdosti zaručujících maximální utlumení přenášených vibrací.

Všechny váhové stoly i pracoviště jsou vybaveny výškově stavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podlahy a nosičem kabeláže, který je rozměrově uzpůsoben pro uložení napájecích zdrojů vah včetně příslušné kabeláže s možností jejich přichycení. Váhové stoly jsou navíc vybaveny úložnou zásuvkou na drobné pomůcky. Vážičí pracoviště je navíc připraveno na používání elektronicky obsluhovaných vah. Je vybaveno výsuvnou policí pro klávesnici a myš, a držákem monitoru a počítače.

**Váhové stoly jsou umístěním váhového kamene a zásuvky přizpůsoben pro práci leváků i praváků a umožňují uživatelsky snadné přestavení z levého na pravé provedení stolu a naopak.**

Tlumící schopnosti jsou navrženy pro zatížení „váhového kamene“ běžnými laboratorními analytickými váhami. Pro instalaci speciálních vah, nás kontaktujte.

	OBJ. ČÍSLO	TYP	POPIS	ROZMĚR (šxhxlxv) [mm]	CENA
	2M10 0410 000 010	N-STV 780-VP	Stůl váhový pro práci v sedě, 2x rám (plech), 1x žulová deska (300x400x80 mm), výsuvná police pro klávesnici, držák monitoru stojánkový	780 x 750 x 860	25 030,00
	2M10 0410 000 001	N-STV 900	Stůl váhový pro práci v sedě, 1x žulová deska (300x400x80 mm), zásuvka	890 x 600 x 750	18 160,00
	2M10 0410 000 003	N-STV 900	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (300x400x80 mm), zásuvka	890 x 600 x 900	18 290,00
	2M10 0410 000 002	M-STV 1200	Stůl váhový pro práci v sedě, 1x žulová deska (300x400x80 mm), zásuvka	1200 x 600 x 750	19 680,00
	2M10 0410 000 004	N-STV 1200	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (300x400x80 mm), zásuvka	1200 x 600 x 900	19 820,00

