



7 STĚNY PRO ROZVOD MÉDIÍ (stěny médiové)

Médiové stěny slouží k umístění vyústění (vývodů) všech dostupných či běžně používaných médií na laboratorním stole. A to jak kapalných či plyných, tak i elektrické energie, slaboproudu, PC sítí atd., nad pracovní desku do prostoru snadného přístupu a obsluhy, či pro napojení do přístrojů. Stěny však také slouží k řádnému a bezpečnému uložení a vedení rozvodů těchto médií, a to s ohledem na pravidelnou údržbu, servis a nutné revize. Vzhledem k rozdílným požadavkům při práci, nabízíme širokou škálu jednotlivých typů a variant médiových stěn s variabilními možnostmi využití a s různým připojením a vývody médií tak, aby pokryly veškeré požadavky různých typů laboratoří, jak s lehkým zatížením jako jsou např. laboratoře fyzikální či elektrotechnické, přes laboratoře s určitou mírou čistoty prostředí, až po laboratoře analytické s těžkým chemickým zatížením prostředí a použitých materiálů.

S ohledem na tuto rozmanitost prostředí, do kterého jsou médiové stěny **MERCI®** určeny, jsou médiové stěny **MERCI®** vyrobeny z kombinací nejkvalitnějších materiálů pro vysokou užitnou hodnotu, kvalitu a životnost. Stejně jako u digestoří **MERCI®** je pro výrobu použit jako základní materiál, slibující vysokou stabilitu a nehořlavost, ocelový plech s povrchovou úpravou vypalovací epoxidovou barvou tvořící velmi pevný skelet s odolným povrchem, a v kombinaci s ostatními materiály vytváří požadované parametry pro daný účel použití médiové stěny.

Množství typů, variant a provedení jednotlivých médiových stěn **MERCI®** umožňuje téměř nepřehlednou volbu možností vybavení Vašeho pracoviště. Nabízíme médiové stěny s různými variantami vývodů médií a to jako sloupové, mostové, panelové, s rozdílným počtem a hloubkou polic, variabilní výškou stěny, různým umístěním odpadní vaničky a vodovodních ventilů atd. Ke všem stěnám je navíc připraveno speciální příslušenství, jako mříže pro aparatury či osvětlení pracovní plochy, více detailností najdete na stránkách stěn jednotlivých modelových řad.

Pro ucelenost návrhu a designovou kompatibilitu jsou médiové stěny **MERCI®** samozřejmě vzhledově jednotné s digestoři **MERCI®**, a člení se tedy na stěny modelové řady N a G a designově univerzální jsou stěny modelové řady Z (závěsné ze stropu), které lze kombinovat se všemi typy digestoří i jinými stěnami.

Podrobnější informace o stěnách řady G naleznete na str. 1 » 64 a o stěnách řady N naleznete na str. 1 » 68.



Stěny pro rozvod médií - stojící na podlaze

- nabízí samonosnou konstrukci a možnost vysokého zatížení ve všech svých variantách, ve kterých je vyráběna, dále možnost instalace odpadní vaničky 120 x 295 mm přímo do médiové stěny, u určitých typů stěny je také možnost volby na levé či pravé straně. Tyto sloupky stojící na podlaze jsou v úrovni pracovní desky spojeny tzv. mostem, který slouží nejen k rozvodu daných médií, ale hlavně k umístění odpadní vaničky, výše nad pracovní deskou jsou sloupky spojeny v různých variantách policemi různých druhů provedení.



Stěny pro rozvod médií - usazené na pracovní desce stolu

- nabízí od médiové stěny stojící na podlaze, souvislou pracovní desku stolu procházející pod médiovou stěnou. Možnost maximálního zatížení ve všech svých variantách, ve kterých je vyráběna, je dána maximální únosností pracovní desky a pracovního stolu. Instalace odpadní vaničky rozměru jak 120 x 120 mm, tak 120 x 295 mm nelze do médiové stěny, ale provádí se přímo do pracovní desky stolu, kde se nabízí možnost umístění vlevo či vpravo. Tyto sloupky stojící na pracovní desce jsou u tohoto typu médiové stěny spojeny až výše nad pracovní deskou v různých variantách policemi různých druhů provedení.



Stěny pro rozvod médií - závěsné (zavěšené nad pracovní deskou stolu)

- nabízí samonosnou zavěšenou konstrukci, která lze zavěsit kamkoliv v místnosti. Je vhodná především k použití u oboustranných laboratorních stolů, kde se z ekonomických důvodů nevyplatí vést médiové připojení podlahou. Stěnu lze zavěsit do libovolné výšky nad pracovní plochou stolu.

Příslušenství - volitelné

Pro uspokojení Vašich specifických požadavků nabízíme originální příslušenství.

Příslušenství stěn je konstrukčně navrženo s ohledem na snadnou i následnou doinstalaci do stěn. Samozřejmě volbou či doinstalací originálního příslušenství **MERCI®** není ohrožena Vaše bezpečnost ani záruka.

Osvětlení



Pod police stěny lze namontovat LED osvětlení, které osvětlí pracovní plochu. Profilovaná hliníková lišta pro rozptyl tepla je ukončena plastovými krytkami a samotný pásek je krytý plastovým matným/mléčným krytem. LED diody svítí bílou studenou barvou s vysokou svítivostí. Součástí lišty je integrovaný bezdotykový vypínač pro ovládání osvětlení.

Mříže



Stěny (kromě **MERCI® Z**) lze osadit nerezovými demontovatelnými mřížemi, které slouží pro uchycení armatur, přístrojů nebo jiného zařízení. Počet vertikálních i horizontálních tyčí je volitelný, ale standardně se skládá z 3 vertikálních (dle šířky stěny) a 2 horizontálních tyčí. Montáž mříží lze provést dodatečně, protože kotvicí místa jsou již součástí základního vybavení stěny, popř. lze mříž demontovat, pokud není využívána.

Elektro



Všechny médiové stěny **MERCI®** mají pro volbu či doplnění elektro zásuvek použit variabilní kazetový systém umožňující libovolnou volbu počtu a typu elektrozásuvek. Veškeré elektrozásuvky stěn jsou vybaveny uzavíratelnou krytkou se zvýšenou ochranou proti vodě a prachu. Součástí příslušenství jsou jak zásuvky na 230 V i 400 V, tak i zásuvky pro bezpečné napětí 12 V - 48 V, či slaboproudé zásuvky pro rozvedení místních sítí.



Stěna pro rozvod médií N - sloupová varianta (umístění médií pouze na jednom sloupku)



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

šířka stěny	900, 1200, 1500, 1800 mm
hloubka stěny	150 mm
hloubka stěny s policí	150, 300 mm
výška stěny	720, 1620 mm
pro výšku pracovní desky	750 mm (stěna stojící na pracovní desce) 900 mm (stěna stojící na zemi)
materiál polic	laminát vysokotlaký (HPL)
provedení polic	- 1x police hl. 140 + 1x police hl. 150 mm - 1x police hl. 140 + 1x police hl. 300 mm
možnost umístění vaničky	u bočního sloupku s médii
umístění médií	na jednom sloupku
provedení	jednostranná

i Stěny všech uvedených parametrů Vám nabídneme dle potřeby.

Stěna pro rozvod médií NE - elektro varianta (umístění elektro na bočních sloupech)



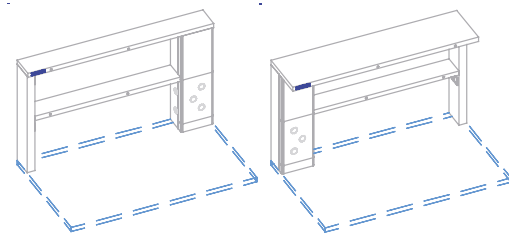
ZÁKLADNÍ PARAMETRY

šířka stěny	900, 1200, 1500, 1800 mm
hloubka stěny	150 mm
hloubka stěny s policí	150, 300 mm
výška stěny	720, 1620 mm
pro výšku pracovní desky	750 mm (stěna stojící na pracovní desce) 900 mm (stěna stojící na zemi)
materiál polic	laminát vysokotlaký (HPL)
provedení polic	- 1x police hl. 140 + 1x police hl. 150 mm - 1x police hl. 140 + 1x police hl. 300 mm
možnost umístění vaničky	ne
umístění médií	na bočních sloupech (pouze elektro)
provedení	jednostranná

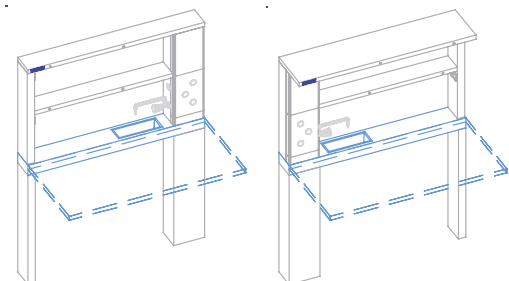
i Stěny všech uvedených parametrů Vám nabídneme dle potřeby.

**Stěny pro rozvod médií typ N, NE (kompatibilní s digestořemi modelové řady MERCI® N)****Stěny kovové N - sloupová (jednostranná, usazená na desce, 4x 230 V, bez odpadní vaničky)**

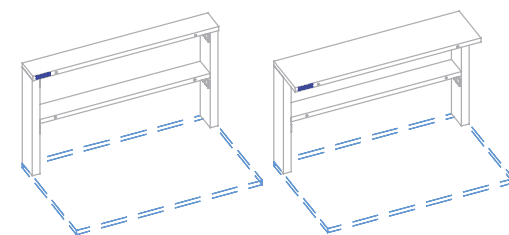
OBJ. ČÍSLO - PRAVÉ	OBJ. ČÍSLO - LEVÉ	POPIS	ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA
2SN0 0131 110 011	2SN0 0131 110 012	se 2 policemi, hl. 150 mm	900 x 150 x 720	13 330,00
2SN0 0131 210 011	2SN0 0131 210 012	se 2 policemi, hl. 150 mm	1200 x 150 x 720	13 880,00
2SN0 0131 310 011	2SN0 0131 310 012	se 2 policemi, hl. 150 mm	1500 x 150 x 720	14 710,00
2SN0 0131 410 011	2SN0 0131 410 012	se 2 policemi, hl. 150 mm	1800 x 150 x 720	15 140,00
2SN0 0131 120 011	2SN0 0131 120 012	se 2 policemi, hl. 150 + 300 mm	900 x 300 x 720	13 590,00
2SN0 0131 220 011	2SN0 0131 220 012	se 2 policemi, hl. 150 + 300 mm	1200 x 300 x 720	14 320,00
2SN0 0131 320 011	2SN0 0131 320 012	se 2 policemi, hl. 150 + 300 mm	1500 x 300 x 720	15 420,00
2SN0 0131 420 011	2SN0 0131 420 012	se 2 policemi, hl. 150 + 300 mm	1800 x 300 x 720	16 020,00

**Stěny kovové N - sloupová (jednostranná, stojící na podlaze, 4x 230 V, s odpadní vaničkou)**

OBJ. ČÍSLO - PRAVÉ	OBJ. ČÍSLO - LEVÉ	POPIS	ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA
2SN0 0111 110 011	2SN0 0111 110 012	se 2 policemi, hl. 150 mm	900 x 150 x 1620	21 110,00
2SN0 0111 210 011	2SN0 0111 210 012	se 2 policemi, hl. 150 mm	1200 x 150 x 1620	22 890,00
2SN0 0111 310 011	2SN0 0111 310 012	se 2 policemi, hl. 150 mm	1500 x 150 x 1620	24 090,00
2SN0 0111 410 011	2SN0 0111 410 012	se 2 policemi, hl. 150 mm	1800 x 150 x 1620	27 600,00
2SN0 0111 120 011	2SN0 0111 120 012	se 2 policemi, hl. 150 + 300 mm	900 x 300 x 1620	21 370,00
2SN0 0111 220 011	2SN0 0111 220 012	se 2 policemi, hl. 150 + 300 mm	1200 x 300 x 1620	23 330,00
2SN0 0111 320 011	2SN0 0111 320 012	se 2 policemi, hl. 150 + 300 mm	1500 x 300 x 1620	24 800,00
2SN0 0111 420 011	2SN0 0111 420 012	se 2 policemi, hl. 150 + 300 mm	1800 x 300 x 1620	28 480,00

**Stěny kovové NE - sloupová (jednostranná, usazená na desce, 8x 230 V, bez odpadní vaničky)**

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA
2SN0 0221 110 011	se 2 policemi, hl. 150 mm	900 x 150 x 720	12 400,00
2SN0 0221 210 011	se 2 policemi, hl. 150 mm	1200 x 150 x 720	13 070,00
2SN0 0221 310 011	se 2 policemi, hl. 150 mm	1500 x 150 x 720	13 600,00
2SN0 0221 410 011	se 2 policemi, hl. 150 mm	1800 x 150 x 720	14 140,00
2SN0 0221 120 011	se 2 policemi, hl. 150 + 300 mm	900 x 300 x 720	12 660,00
2SN0 0221 220 011	se 2 policemi, hl. 150 + 300 mm	1200 x 300 x 720	13 510,00
2SN0 0221 320 011	se 2 policemi, hl. 150 + 300 mm	1500 x 300 x 720	14 300,00
2SN0 0221 420 011	se 2 policemi, hl. 150 + 300 mm	1800 x 300 x 720	15 020,00

**Stěny kovové NE - sloupová (jednostranná, stojící na podlaze, 8x 230 V, bez odpadní vaničky)**

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA
2SN0 0211 110 011	se 2 policemi, hl. 150 mm	900 x 150 x 1620	18 030,00
2SN0 0211 210 011	se 2 policemi, hl. 150 mm	1200 x 150 x 1620	19 630,00
2SN0 0211 310 011	se 2 policemi, hl. 150 mm	1500 x 150 x 1620	21 690,00
2SN0 0211 410 011	se 2 policemi, hl. 150 mm	1800 x 150 x 1620	24 140,00
2SN0 0211 120 011	se 2 policemi, hl. 150 + 300 mm	900 x 300 x 1620	18 300,00
2SN0 0211 220 011	se 2 policemi, hl. 150 + 300 mm	1200 x 300 x 1620	20 070,00
2SN0 0211 320 011	se 2 policemi, hl. 150 + 300 mm	1500 x 300 x 1620	22 390,00
2SN0 0211 420 011	se 2 policemi, hl. 150 + 300 mm	1800 x 300 x 1620	25 020,00

